

# CONTEC



Sans  
BisGMA\*  
TEGDMA\*  
HEMA\* !



La liaison sûre.

# L'adhésif pour brackets photopolymérisable.

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

CONTEC Ic réunit tous les atouts qu'offrent les adhésifs photopolymérisables. Vous avez donc plus de temps pour la pose des brackets avant la prise de l'adhésif.

Grâce à sa grande viscosité, l'adhésif reste sur le bracket et ne s'écoule pas. CONTEC Ic offre également une excellente force de liaison et constitue donc une solution de choix pour toutes les procédures de collage.

La seringue ergonomique facilite la manipulation et permet un contrôle ciblé de la quantité d'adhésif.

L'atout principal de CONTEC Ic est l'absence de BisGMA\*, de TEGDMA\* et de HEMA\*. Le potentiel allergisant de ces substances a été mis en évidence.




#### Set CONTEC Ic (REF 163-110-00) comprenant :

- 3 x 3 g adhésif CONTEC Ic
  - 1 x 5 ml primer CONTEC Ic/Icr
  - 2 x 2,5 ml gels de mordantage CONTEC
  - 6 x canules à usage unique pour gel de mordantage CONTEC
  - 50 x pinceaux à usage unique CONTEC
  - 1 x instrument deux en un CONTEC
  - 1 x bloc de malaxage CONTEC
- Pour env. 800 brackets (40 cas).



\* CONTEC Ic pour brackets en métal et en céramique ne contient pas de BisGMA (méthacrylate de glycide et de bisphénol A), de TEGDMA (diméthacrylate de triéthylèneglycol) ni de HEMA (méthacrylate d'hydroxyéthyle). CONTEC Ic pour brackets en plastique ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

- Excellente force de liaison
- Pâte adhésive facile à doser et présentant une très bonne stabilité
- Durcit sous toutes les bases de brackets (il faut prévoir un primer pour les brackets en plastique)
- Sans BisGMA\*, TEGDMA\* et HEMA\*

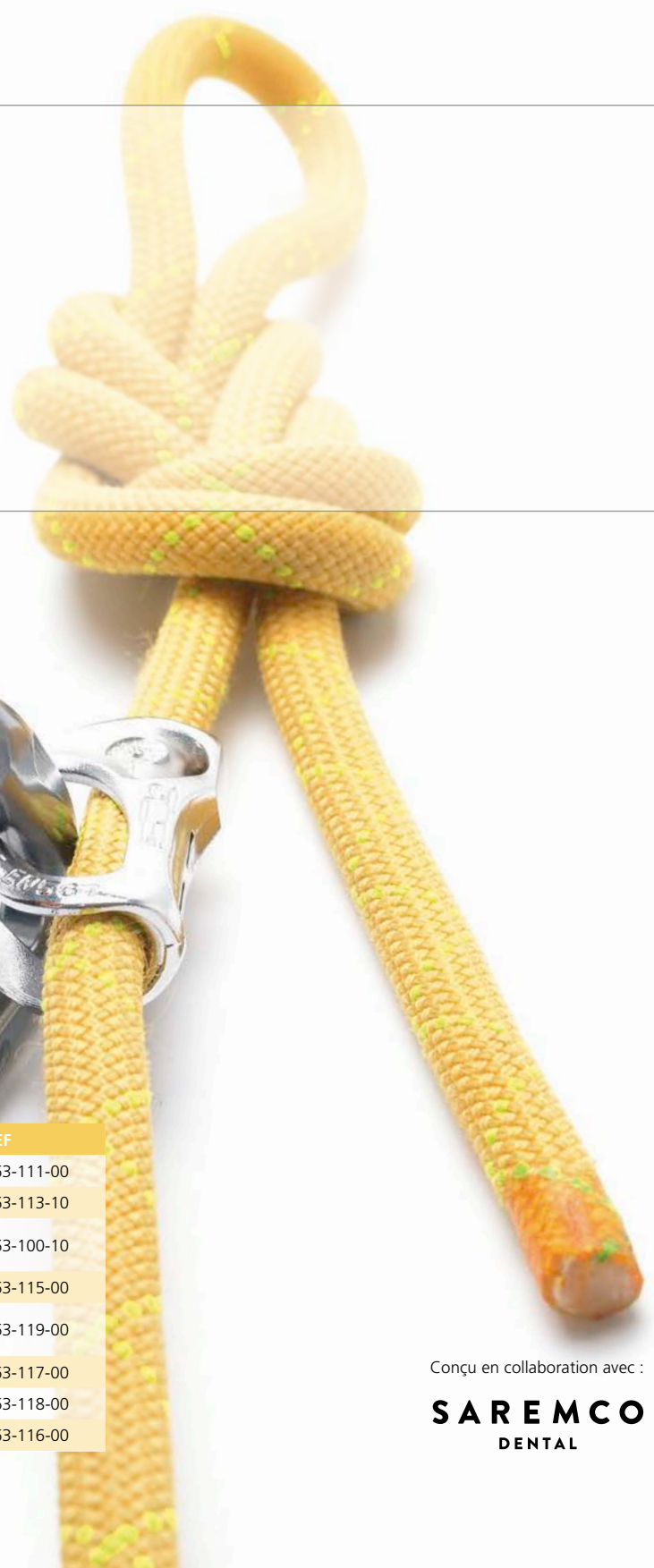

Réassort	Conditionnement	REF
Adhésif CONTEC Ic	2 x 3 g seringue	163-111-00
Primer CONTEC Ic/lcr	1 x 5 ml flacon	163-113-10
Primer pour matières plastiques CONTEC	1 x 5 ml flacon	163-100-10
Gels de mordantage CONTEC	2 x 2,5 ml seringue	163-115-00
Canules à usage unique pour gel de mordantage CONTEC	10 pièces	163-119-00
Pinceaux à usage unique CONTEC	50 pièces	163-117-00
Instruments deux en un CONTEC	5 pièces	163-118-00
Blocs de malaxage CONTEC	2 pièces	163-116-00

Conçu en collaboration avec :

**SAREMCO**  
DENTAL

# L'adhésif pour contentions photopolymérisable.

Pour le collage de contentions fixes.



CONTEC lcr a été développé pour répondre aux exigences spécifiques en matière de collage des contentions orthodontiques fixes. CONTEC lcr permet de fixer les contentions de manière sûre et offre un maximum de confort au patient. L'adhésif se distingue par une longévité remarquable et d'excellentes valeurs d'adhérence.

La canule recourbée et la fine seringue facilitent la manipulation dans la zone antérieure linguale.

CONTEC lcr ne contient pas de TEGDMA\* ni de HEMA\*. Pour les patients chez lesquels une allergie à ces composants a été diagnostiquée, CONTEC lcr constitue donc le choix idéal.

Réassort	Conditionnement	REF
Adhésif CONTEC lcr	1 x 3,4 g seringue	163-131-00
Canules à usage unique CONTEC lcr	10 pièces	163-120-00
Primer CONTEC Ic/lcr	1 x 5 ml flacon	163-113-10
Gels de mordançage CONTEC	2 x 2,5 ml seringue	163-115-00
Canules à usage unique pour gel de mordançage CONTEC	10 pièces	163-119-00
Pinceaux à usage unique CONTEC	50 pièces	163-117-00
Instruments deux en un CONTEC	5 pièces	163-118-00
Blocs de malaxage CONTEC	2 pièces	163-116-00

Conçu en collaboration avec :

**SAREMCO**  
DENTAL

\* CONTEC lcr ne contient pas de TEGDMA (diméthacrylate de triéthylène glycol) ni de HEMA (méthacrylate d'hydroxyéthyle).

- Adhésif pâteux et hautement chargé
- Longévité remarquable
- Durcit en laissant apparaître une surface parfaitement lisse
- Ne contient pas de TEGDMA\* ni de HEMA\*

Sans  
TEGDMA\*  
HEMA\* !




**Set CONTEC Icr (REF 163-130-00) comprenant :**

- 2 x 3,4 g adhésif CONTEC Icr
- 6 x canules à usage unique CONTEC Icr
- 1 x 5 ml primer CONTEC Ic/Icr
- 2 x 2,5 ml gels de mordantage CONTEC
- 6 x canules à usage unique gel de mordantage CONTEC
- 50 x pinceaux à usage unique CONTEC
- 1 x instruments deux en un CONTEC
- 1 x blocs de malaxage CONTEC

Pour env. 80 appareils de contention torsadés ou  
env. 250 appareils de contention 3-3.

# L'adhésif chémopolymérisable prêt à l'emploi.

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

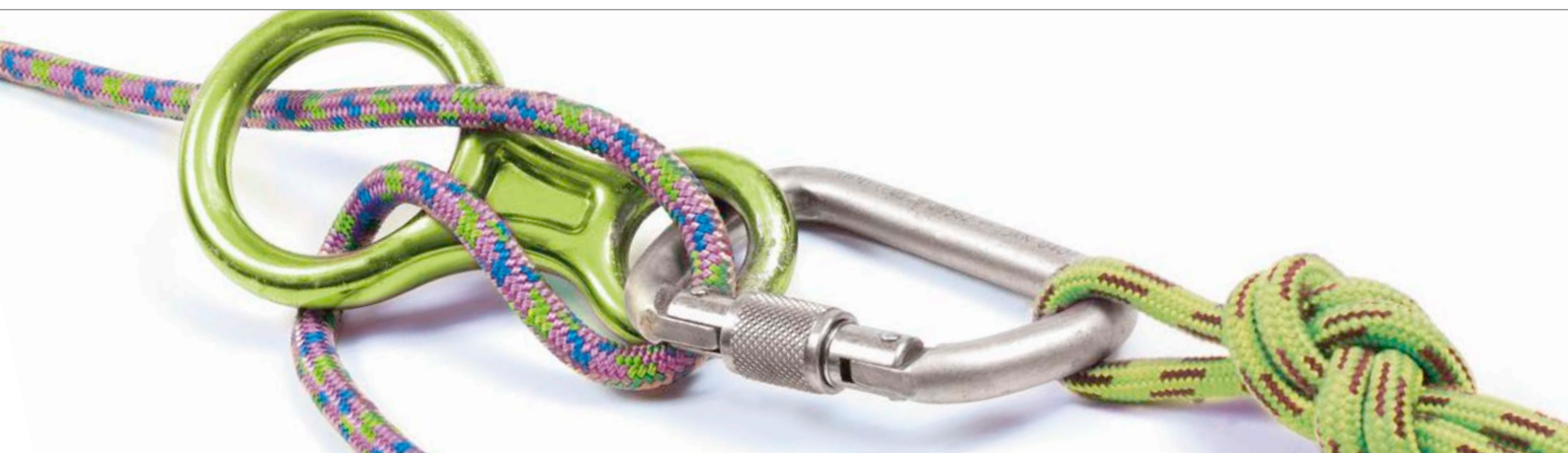

ConTec Go! est un adhésif pour brackets chémopolymérisable et prêt à l'emploi. Il comprend une pâte adhésive ainsi qu'un activateur. Le durcissement est initié par pression. Ceci permet de positionner le bracket de manière optimale sur la dent avant que l'adhésif ne durcisse.

Les forces de liaison nécessaires pour la mise en place de l'arc apparaissent dans les 5 minutes suivant la pose des brackets. ConTec Go! présente une forte viscosité et a été mis au point de manière à offrir au bracket une stabilité optimale. ConTec Go! dispose, en outre, d'une bonne stabilité chromatique tout au long du traitement.

Réassort	Conditionnement	REF
Adhésif ConTec Go!	2 x 2,5 g seringue	163-321-00
Activateur ConTec Go!	1 x 10 ml flacon	163-314-00
Gels de mordançage ConTec Go!	2 x 2,5 g seringue	163-312-00
Canules à usage unique pour gel de mordançage ConTec Go!	10 pièces	163-322-00
Pinceaux à usage unique ConTec Go!	50 pièces	163-317-00
Porte-pinceaux ConTec Go!	5 pièces	163-319-00
Spatules ConTec Go!	50 pièces	163-318-00
Blocs de malaxage ConTec Go!	2 pièces	163-316-00

- Adhésif visqueux pour une stabilité nettement plus élevée
- Réduction du temps de prise à 5 minutes
- Seringues ergonomiques pour une manipulation aisée et un dosage sûr

**Set ConTec Go! (REF 163-307-00) comprenant :**

- 3 x 2,5 g adhésif ConTec Go!
  - 1 x 10 ml activateur ConTec Go!
  - 2 x 2,5 g gels de mordantage ConTec Go!
  - 6 x canules à usage unique pour gel de mordantage ConTec Go!
  - 50 x pinceaux à usage unique ConTec Go!
  - 1 x porte-pinceau ConTec Go!
  - 1 x spatule ConTec Go!
  - 1 x bloc de malaxage ConTec Go!
- Pour env. 600 brackets (30 cas).



# Groupe Dentaureum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



Dispositif Médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé  
Marquage CE 0483 – DM – Classe IIa. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.  
Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.  
Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance maladie.

Mise à jour : 06/19  
Sous réserve de modifications

